

Sacrale Neuromodulatie: uw eigen afstandsbediening (6)

Patiëntenprogrammeerapparaat

Aanvullend heeft de afdeling Urologie een handleiding voor u samengesteld voor het gebruik van uw iCon, uw eigen afstandsbediening.

Overzicht knoppen en beeldscherm van de afstandsbediening



Het programmeerapparaat aanzetten

Voordat u uw neuromodulator kunt controleren of een instelling kunt veranderen, moet u uw afstandsbediening inschakelen. Druk hiervoor op het kleine blauwe knopje rechtsonder op de voorkant van de afstandsbediening.

Er verschijnt nu een afbeelding met een zwarte hand waarbij een vinger wijst naar de knop met de twee pijlen, zie de plaatjes hieronder. Druk op de grijze knop met de twee pijlen, aan de zijkant van uw afstandsbediening. Laat de knop los en houd de afstandsbediening met het scherm van uw af, op de plek van de neuromodulator.



Met uw stimulator synchroniseren

Afstandsbediening en neuromodulator met elkaar verbinding laten maken, zodat ze elkaar informatie kunnen doorsturen.



Het programmeerapparaat en uw stimulator praten met elkaar.

Problemen bij het synchroniseren

Druk nogmaals op de sync-toets. Breng het programmeerapparaat (met het scherm van u af) dichterbij uw stimulator.



Wanneer u de tekening met het vraagteken (zoals hier links afgebeeld op het scherm) ziet, kunnen de afstandsbediening en neuromodulator elkaar niet vinden. Probeer dan nogmaals verbinding te maken. Druk wederom op de grijze knop met de pijlen en houd de afstandsbediening op de plaats van de neuromodulator.

De therapiesterkte aanpassen

Afstandsbediening en neuromodulator met elkaar verbinding laten maken, zodat ze elkaar informatie kunnen doorsturen.



Wilt u het stroompje verhogen of verlagen?

Gebruik dan de grijze + (plus) of – (min) knopjes, bovenaan het scherm, aan de voorkant van de afstandsbediening. Druk op de gewenste knop en houd de afstandsbediening op de plaats van de neuromodulator. Op het scherm ziet u, als het gelukt is, ook het getal (bijvoorbeeld 0,4 volt) veranderen.

De stimulator uitzetten



Het kan nodig zijn de neuromodulator uit te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van de stimulatie, wanneer u een operatie ondergaat of een hartfilmpje laat maken. Bij sommige tandartsbehandelingen is het ook nodig hem uit te zetten. Vergeet achteraf niet om hem terug aan te zetten! Druk op de middelste

blauwe knop en houd de afstands-bediening op de plaats van de neuromodulator. U ziet nu in het scherm een neuromodulator


De stimulator aanzetten



In principe staat de neuromodulator altijd AAN. Behalve als u hem zelf eerder uit heeft geschakeld. U kunt hem dan terug aanschakelen door de bovenste blauwe knop in te drukken en afstandsbediening op de plaats van de neuromodulator te houden. Op het scherm ziet u nu een neuromodulator links boven met bliksemschicht erin.

Neem uit voorzorg bij bezoek aan een arts altijd uw afstandsbediening mee

Van programma veranderen

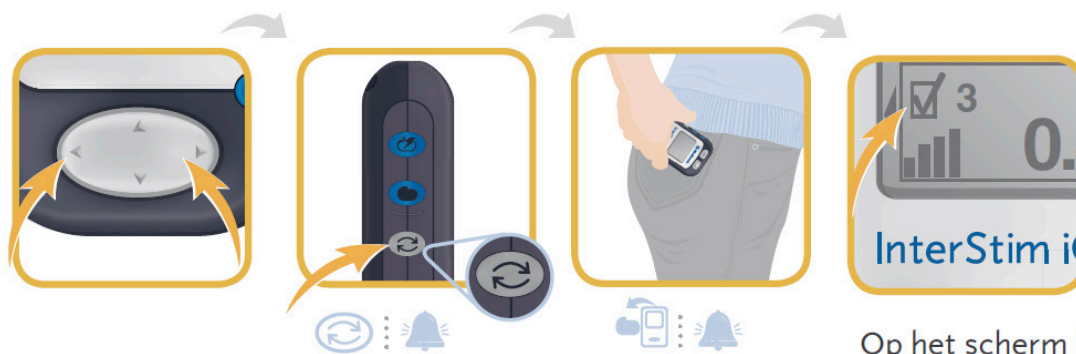

Op het scherm is een vinkje in het vakje te zien. Dit programma is actief.

Indien uw arts verschillende programma's heeft ingesteld om uit te proberen, is het soms nodig om zelf van programma te wisselen op een afgesproken moment (bijvoorbeeld nadat uw programma nummer 1 twee weken heeft getest). Het programma waarbij een vinkje in het hokje voor het getal staat, is het programma dat nu aanstaat. De andere programma's hebben geen vinkje in dit hokje staan.

Om te wisselen van programma drukt u op de grijze pijltjes knoppen naar rechts (of links). U zoekt het volgende programma en houdt dit in het scherm zichtbaar. In de afbeelding hierboven is programma nummer 3 afgesproken om als volgende programma te gaan testen. U ziet nu een hokje zónder vinkje en een 3 (het vinkje staat immers nog bij programma 1).

Druk nu op de grijze pijlenknop aan de zijkant van de afstandsbediening en houd de afstandsbediening bij de neuromodulator. Als het gelukt is ziet u nu een vinkje in het hokje voor de 3. Anders probeer nogmaals. U ziet, als u wederom met de knopjes naar links en rechts gaat, dat het vinkje bij programma 1 nu ook verdwenen is.